




BIOPTRON[®] 
By Zepter Group

AGLEX Inc.

美容・健康のためのBIOPTRON

光のナノシャワーが素肌の中から輝かせる。

肌に必要なみずみずしさのもとは、美しい空気・水・適度な太陽の輝きです。
バイオプトロンは可視光線と一部の赤外線を利用したスイス生まれのビューティーライト。
100%紫外線カットで日焼けの心配はもちろんありません。
1回10分程度の照射で肌の健やかさを保ち、心地よい温かさが気持ちをリラックスさせます。

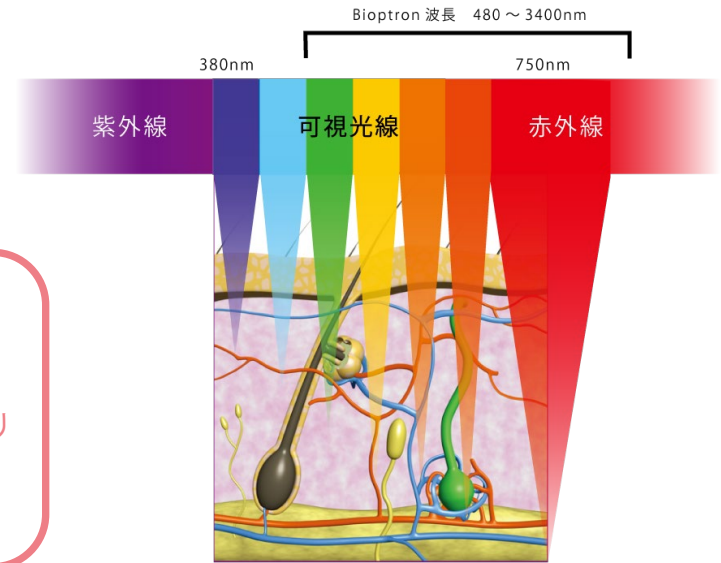

可視光線

可視光線を浴びると..
レインボーカラー(紫・藍・青・緑・黄・橙・赤)の波長が、バランスの取れた健やかな肌・身体へと導きます。

赤外線

赤外線を浴びると..
身体を深部から温め、全身の巡りと働きをUPさせます。また化粧品の浸透を助けます。

足の裏へ照射すると
全身の代謝UP!!



目元の疲労回復、
エイジングケアに..。



頭部へ照射すると
頭皮がほぐれ髪は
サラサラに..。



体内時計を光でリセット
生活リズムが整います。



メイク前に照射すれば
ファンデーションが
すべるようになります。



お腹へ20~30分照射
すると便秘の解消にも..。




使い続けると、
素肌に自信が..
-10歳肌!!




BIOPTRONの特性

バイオプトロンの光は、内蔵されている5枚のフィルターにより光線を直線化して平行線状に集光させているため、効率の良い有効性の高い光となっています。

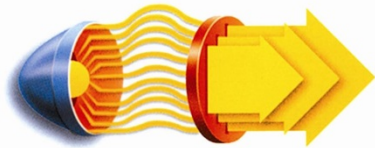


バイオプトロンの光は、可視光線と一部の赤外線を含む広い波長範囲(480-3400nm)です。紫外線は100%カットされており、日焼けの心配はもちろんありません。

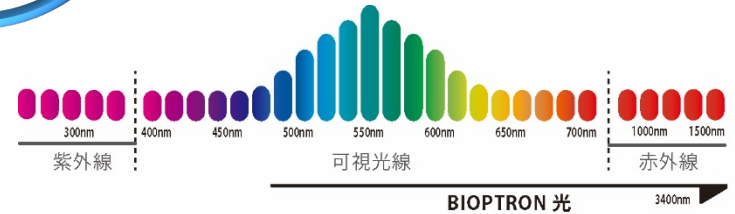


バイオプトロンの光のエネルギーは、安心・安全に、身体や肌を活発にさせる最適な密度、(1分間当たりMAX2.4J/cm²)に設定されています。



バイオプトロンの光は、レーザーのような一貫性のある刺激的光とは違い、位相の違う一貫性のないゆるやかな光の為、肌にダメージを与えることなく、安全にトリートメントが行えます。

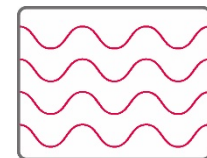


レーザー光

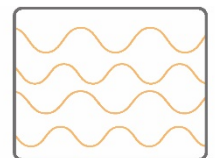

Biopton光


■ BIOPTRON 2

世界中のエステサロンで使用されている業務用タイプ。照射面積が大きく効率良くトリートメントが行えます。

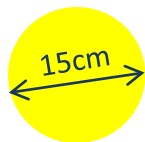

定価: ¥450,000(税抜)

- サイズ: W200 × D260 × H490mm
- 質量: 4.46Kg
- 消費電力: 100~140W
- フィルター直径: 15cm

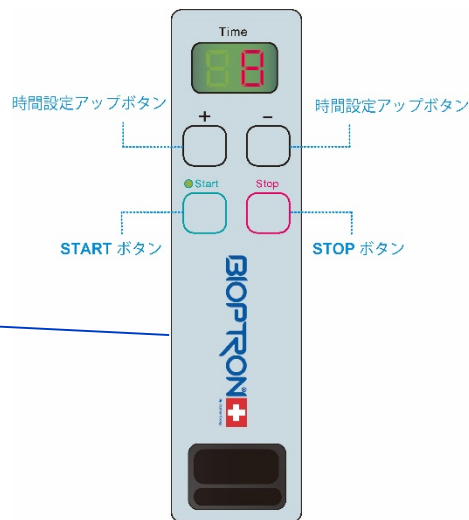

B2卓上スタンド
¥36,000(税抜)



B2スタンド
¥46,000(税抜)


How to use



トリートメント部位の汚れやメイク・脂分を取り除きます。



トリートメント部位に水分と酸素を補給するため、スウォッツをスプレーします。

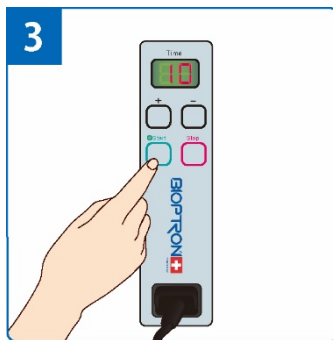

タイマーを設定します。目安は1カ所4-10分です。




STARTボタンを押して照射します。途中で何度か、スウォッツをスプレーします。



ライトを肌から約10cm 離し部位に対して90°の角度で照射します。

■ BIOPTRON Pro1

卓上タイプの中型タイプ。フレキシブルな動きでストレスを感じずに光を浴びていただけます。

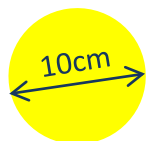

定価: ¥418,000(税抜)

- サイズ: W255 × D385 × H410~720mm
- 質量: 3.4Kg
- 消費電力: 70W
- フィルター直径: 10cm



全身トリートメントに対応。
最適な位置で照射を可能にした設計・デザイン。




Pro1スタンド
¥28,000(税抜)


How to use




トリートメント部位の汚れやメイク・脂分を取り除きます。

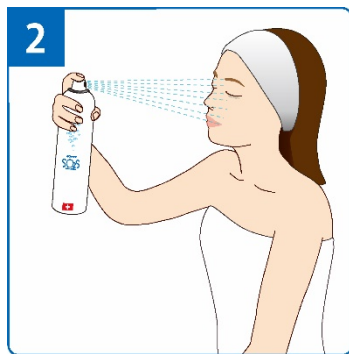


トリートメント部位に水分と酸素を補給するため、スウォッツをスプレーします。

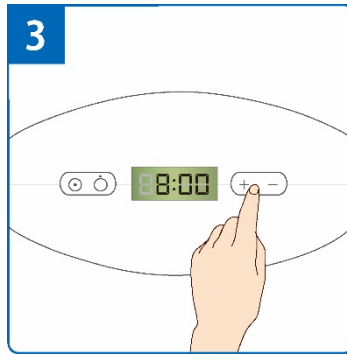

タイマーを設定します。
目安は1カ所4-10分です。

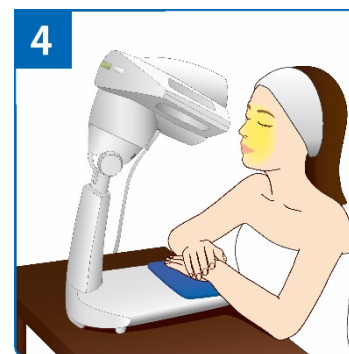


STARTボタンを押して照射します。途中で何度か、スウォッツをスプレーします。

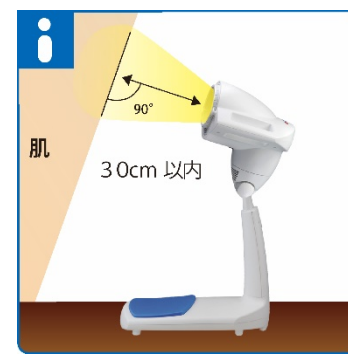

ライトを肌から約10cm 離し部位に対して90°Cの角度で照射します。

■ BIOPTRON YOUTHRON

コンパクトサイズにタイマー機能がついて新登場！！人間工学に基づいたハンドグリップで手軽に自宅でケアができます。

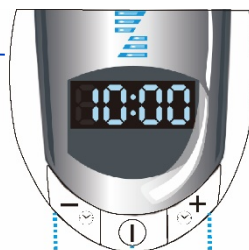

時間調節 (-)

時間調節 (+)

START/STOP



YOUTHRONスタンド
¥16,000(税抜)

定価: ¥135,000(税抜)


- サイズ: 65 × D180 × H200mm
- 質量: 0.5Kg
- 消費電力: 29W
- フィルター直径: 5cm

持ち運びに便利な保護ケース付


How to use




1 トリートメント部位の汚れやメイク・脂分を取り除きます。

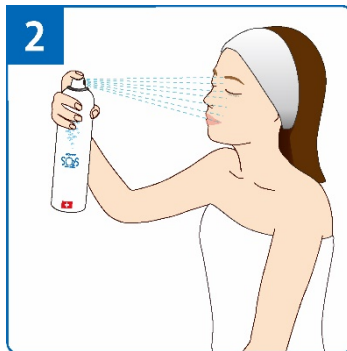

2 トリートメント部位に水分と酸素を補給するため、スウォッツをスプレーします。

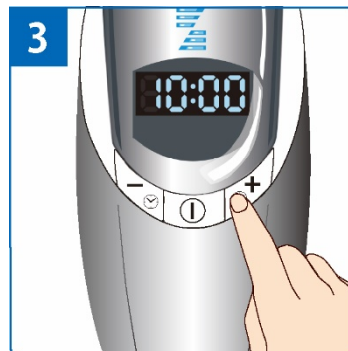

3 タイマーを設定します。目安は1カ所4-10分です。

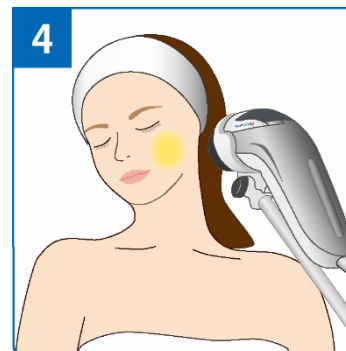

4 STARTボタンを押して照射します。途中で何度か、スウォッツをスプレーします。



5 ライトを肌から約10cm 離し部位に対して90°Cの角度で照射します。

■SO2S スウォッツ

スイスの大自然から生まれた高濃度酸素水スプレー。
「100%ピュアな天然水」に純粋酸素を高圧注入。ナチュラル製法で肌質を選ばず赤ちゃんにもお使いいただけます。
酸素をたっぷり含んだマイクロな粒子が瞬時に潤わせ、ゆっくりと浸透しお肌をひきしめます。



定価: ¥1,800(税抜)

- 成分:水、酸素
- 原産国:スイス

100%ナチュラル

- ◆ミクロの細かい霧で、汚れや不要物を取り除く!
- ◆酸素による殺菌効果!
- ◆ナチュラルなのでどんなお肌にも対応(敏感肌にも)!
- ◆滝壺にいるとき以上のマイナスイオン効果!

【水質の特徴】

- ◇水源地:スイス(グラールス州ナツフェル)
- ◇成分:水(湧水20%・地下水80%)、酸素
- ◇ミネラル成分:Ca⁺⁺114.0mg/ℓ Mg⁺⁺7.1mg/ℓ Na⁺2.5mg/ℓ

No 合成香料

No 合成色素

No 合成防腐剤

Facial

- 洗顔後のうるおい 補給に
- お風呂上りの毛穴の引き締め
- プレ化粧品として
(スキンケアの浸透を高めます)
- 日焼け後のほてったお肌に
- お肌の洗浄、ニキビケアに
- シェービング後にも

Hair

- パサついた髪に潤い補給
- ブロー時に使用すると、
ツヤツヤサラサラに
- 広がりがやすい髪もまとまりやすく
- スカルプケアにも

Body

- お風呂上りの全身に潤い補給に
- スポーツ後の潤い補給に
- かさつきやすい肌に
- 豊富なマイナスイオン発生による
リラクゼーション効果

■ BIOPTRON カラーレンズ

□BIOPTRON Pro1 カラーレンズ
¥90,000



□BIOPTRON YOUTHTRON カラーレンズ
¥68,000

※BIOPTRON Compactにも装着可能です。



RED



ORANG
E



YELLO
W



GREEN



INDIGO



BLUE



PURPLE



■ BIOPTRON カラーレンズ

美容と健康のために

バイオプトロン カラーレンズとは？

自然には、身体を健康な状態に維持する独自の方法があり、とりわけ色と光によるセラピーは、人類が最初に用いた、テクノロジーだと考えられています。バイオプトロンのカラーライトシステムとは、わたしたちの心身の活力向上のために7つのカラーと光を利用する方法です。「心」「身体」「精神」に作用し、トータルバランスを整えます。

バイオインフォメーション…

物質にはそれぞれ固有の波動(振動)があり、この物質ごとに異なる波動パターンを取り出しものをバイオインフォメーションと言います。バイオプトロンカラーレンズは、各色で異なる波動(振動)を練り込んだ特殊なレンズを使用しています。カラーレンズを通した光を肌に透過することにより身体に光信号が与えられ、時速360キロのスピードで全身の細胞に行き渡り、健康な身体を維持すべく、それぞれの色による波動(バイオインフォメーション)の伝達量が高まります。

●美容のために

しわやしみ、肌の透明感や整合性、保湿力など、肌は常に身体のエネルギー状態を浮き彫りにすると言われています。そのため内側からエネルギーを整えていくと、肌に良い影響を与えることができます。バイオプトロンのカラーシステムは、それぞれの色によるエネルギーを与えることにより内側からバランスのとれたイキイキとした肌へと導きます。



●安らぎのために

バイオプトロンのカラーシステムで用いる光は心身にくつろぎを与えます。様々な色の光がエネルギーの枯渇した中核に照射され、色の組み合わせにより適切に心身のバランスを整え、調和と安らぎを取り戻します。



7つの色の性質と特徴

| 色 | <p>RED 赤</p>  | <p>ORANGE 橙</p>  | <p>YELLOW 黄</p>  | <p>GREEN 緑</p>  | <p>BLUE 青</p>  | <p>INDIGO 藍</p>  | <p>PURPLE 紫</p>  |
|--------|---|---|--|---|---|--|---|
| 一般的な働き | <ul style="list-style-type: none"> ・活動的にする ・エネルギーチャージ ・躍動的にする ・感覚を強化する | <ul style="list-style-type: none"> ・修復する ・活気づける ・アイデア創造性を促す ・不安感を取り除く | <ul style="list-style-type: none"> ・元気づける ・エネルギーの流れを強化 ・気持ちをオープンにする ・明るくする | <ul style="list-style-type: none"> ・心身のバランス調整 ・深いリラクゼーション ・緊張の緩和に | <ul style="list-style-type: none"> ・心身の鎮静全般に ・気分のクールダウン ・集中力アップ | <ul style="list-style-type: none"> ・直感力アップ ・思考力、集中力アップ ・快眠のために ・イライラを鎮める | <ul style="list-style-type: none"> ・インスピレーションを高める ・不安感を弱める ・心身の安定 |
| 美容に | <ul style="list-style-type: none"> ・肌につやを与える ・コラーゲンの生成を促進 ・エイジングケアに ・疲れた肌の癒しに | <ul style="list-style-type: none"> ・肌を滑らかに ・コラーゲン生成の促進 ・セルライトケア | <ul style="list-style-type: none"> ・ターンオーバーの正常化 ・敏感肌の安定 ・デトックス作用 | <ul style="list-style-type: none"> ・肌ストレスの軽減 ・保水力の促進 ・しみ、くすみの改善 | <ul style="list-style-type: none"> ・肌の鎮静と休息に ・皮脂バランスを整える ・アクネ、オイリー肌に | <ul style="list-style-type: none"> ・日焼け後などのダメージ肌に ・炎症を抑える | <ul style="list-style-type: none"> ・肌の強化と引き締め ・赤ら顔の改善 ・頭皮のリラックス |

あなたにあったカラーは??

フェイストラブル別カラーチャート

FACE

START!!

最近お肌が疲れている。年齢を感じ始めた。

肌がカサカサしていて潤いが足りない。

化粧崩れが気になる。

ニキビがしやすい。

肌に透明感がなく、
全体的にくすんでいる。

肌に弾力がない。

化粧水だけでは肌がつっぱる。

Tゾーンの
毛穴が目立つ。

肌にツヤがない。

刺激に弱く、
すぐ赤くなる。

部分的に
乾燥している。

しみがあり、
目元のくすみも
気になる。

全体的にたるみが
できて、口元の
法令線も気になる。

肌がカサカサ
しており、目元の
乾燥が気になる。

肌に炎症などの
トラブルがあり、
ときどき痒くなる
ことがある。

洗顔後もすぐ顔が
テカテカしてしまう。

むくみが気になる。



GREEN



RED



YELLOW



ORANGE



INDIGO



PURPLE



BLUE

FACE トラブル別トリートメント例

※バランス良くカラーを照射するために、補色も同時に照射します。
(例.橙の補色:青)

ORANG

乾燥肌に

オレンジ/4~8分

ブルー/30秒~1分



GREEN

しみ・くすみ肌に

グリーン/4~8分

レッド/30秒~1分




INDIGO

ダメージ肌

敏感肌に

インディゴ/4~8分

イエロー/30秒~1分

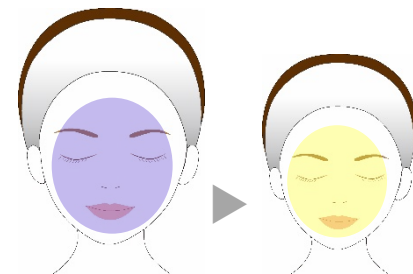

RED

しわ・たるみ肌に

レッド/4~8分

グリーン/30秒~1分



PURPLE

混合肌に

バイオレット/4~8分

イエロー/30秒~1分



YELLOW

むくみ肌に

イエロー/4~8分

バイオレット/30秒~1分



BLUE

オイリー肌

ニキビ肌に

ブルー/4~8分

オレンジ/30秒~1分




あなたにあったカラーは??

ボディラブル別カラーチャート

BODY

START!!

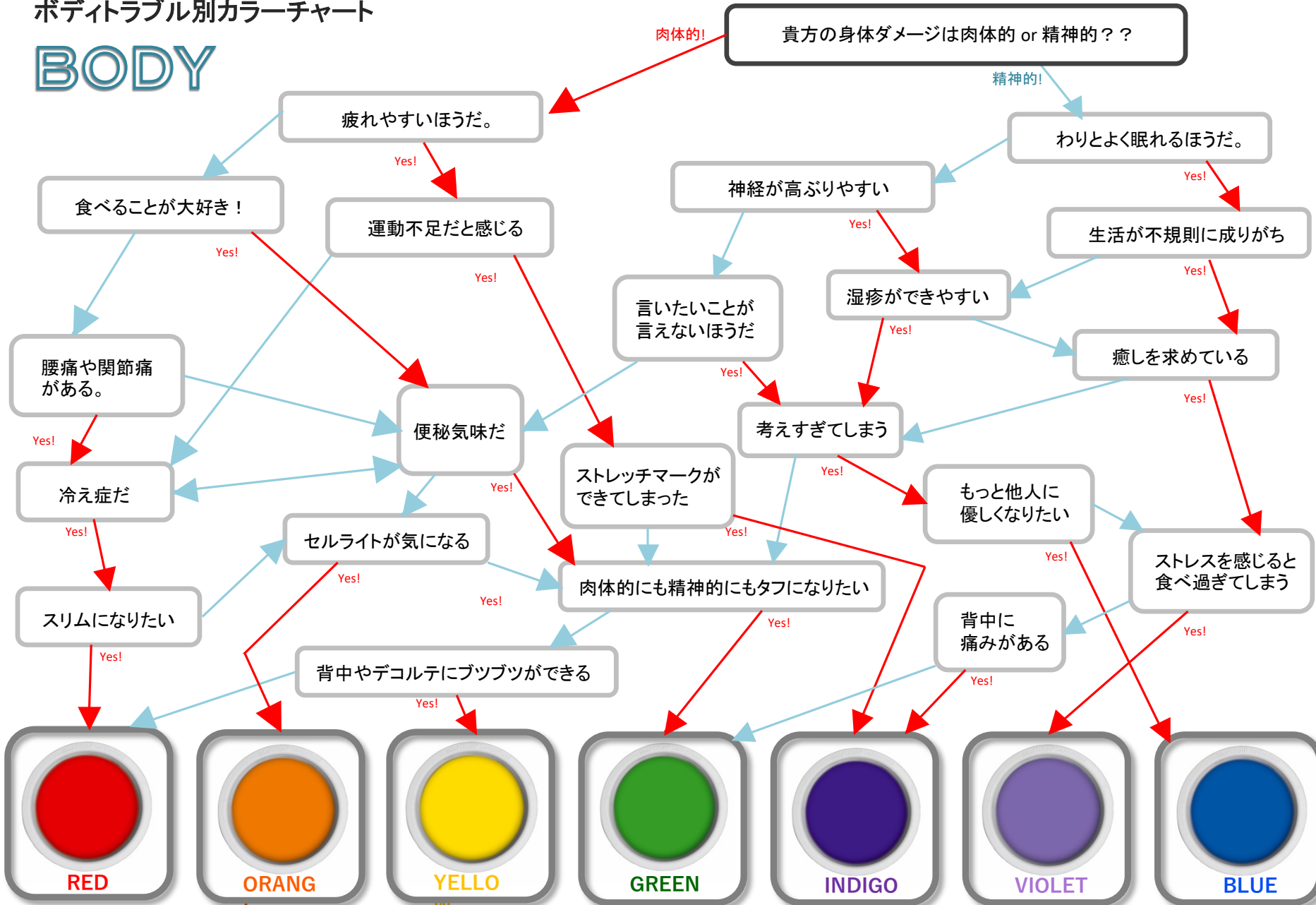


BODY

トラブル別トリートメント例

GREEN

疲労の溜まって
いる方に

グリーン/10～20分

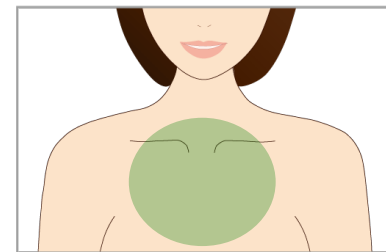


照射例: デコルテ

INDIGO

不規則な生活で肌トラブル
や体調不良のある方

インディゴ/10～20分

オレンジ/1分

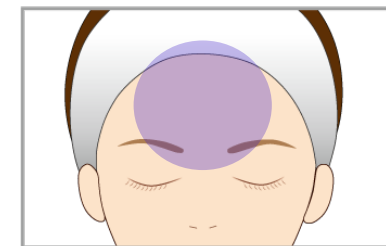


照射例: 額

RED

痩身メニュー全般に

レッド/10分

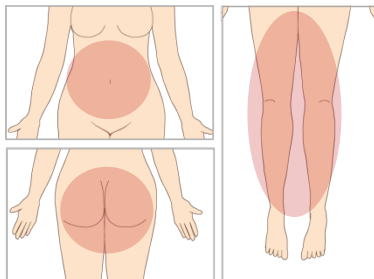


照射例: 気になるお腹・お尻など

VIOLET

たるみ肌・老化肌に

バイオレット/10～15分

イエロー/1分

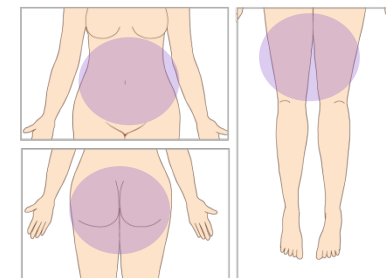

照射例: 老化肌の気になる部位


ORANG

E

セルライトケアに

レッド/4～8分

グリーン/30秒～1分

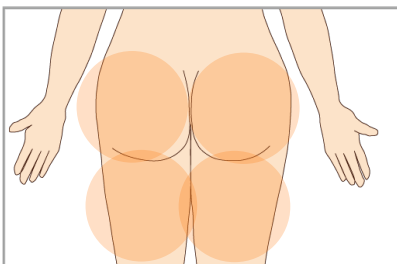


照射例: 気になる太ももなど

BLUE

イライラ
している方に

ブルー/10分

レッド/1分

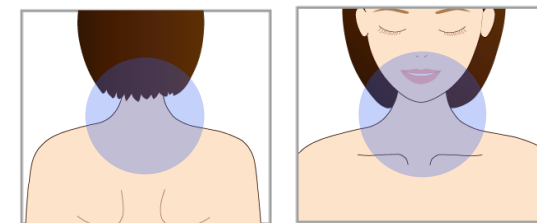

照射例: 首の後ろ、または喉


YELLO

W

むくみ・便秘に

イエロー/10分

バイオレット/2分

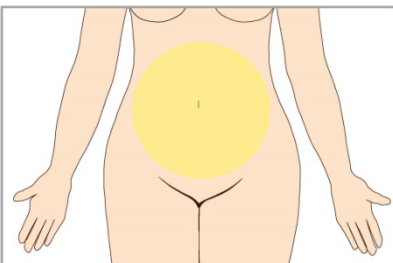

照射例: お腹など

■ BIOPTRON FAQ

Q1. バイオプトロンから照射される光には紫外線も含まれていますか？

A. いいえ。紫外線は一切含みませんので、安心して照射して頂けます。もちろん日焼けの心配もありません。

Q2. 一回の照射時間は何分ですか？

A. バイオプトロン2とブロワンの場合は、全顔で約8分です。コンパクトとユースロンの場合は、照射面積が小さいので全顔で約15分をおすすめしております。

Q3. 8分以上バイオプトロンの光に当たっても大丈夫ですか？

A. はい、大丈夫です。8分以上当たっても問題はありますが、長ければ長い程効果が出るものでもありません。

Q4. 一日何回照射すればよいですか？

A. 1日に朝と晩の2回、それぞれ約8分の照射が理想です。一度に何時間も浴びるよりも、毎日こまめに浴び続けることが重要です。

Q5. 赤ちゃんにも使えますか？

A. はい、使えます。バイオプトロンの光は、レーザー光などと違い、緩やかな波長の光を使用しています。また、直接お肌にも触れませんので、老若男女、安心してどなたでもご使用いただける設計になっています。但し、赤ちゃんの場合お顔に直接当てるのではなく、足の裏など身体に2~3分程度の照射でOKです。

Q6. 光を直接目に照射しても大丈夫ですか？

A. バイオプトロンの光は、目に照射しても問題のない光ですが、眩しいと感じる方は、目を閉じていただいた方がリラクゼーション効果も高まります。

Q8. コンタクトをしたまま照射しても大丈夫ですか？

A. 目元に照射する場合は、メガネやコンタクトは外してください。またアクセサリなどの貴金属類は、はずしてください。

Q9. 顔以外にも使用できますか？

A. はい、できます。頭の前からつま先まで全身くまなく使っていただけます。

Q10. メイクしたまま照射しても大丈夫ですか？

A. メイクにより光が遮断される場合がございますので、メイクや汚れを落とした清潔なお肌にご使用ください。

Q11. 必ず専用化粧品のスウォッツを使用しなければいけませんか？

A. スウォッツは高濃度の酸素が溶け込んだスプレーです。一緒にご使用いただくバイオプトロンの効果を高めることができますので、オススメです。

Q12. 敏感肌に照射しても大丈夫ですか？

A. 特にお肌が敏感で気になる方は照射距離を10cmよりも離し、1回の照射時間を短め(約5分)に設定して様子を見て下さい。また皮ふの乾燥を防ぐ為、スウォッツをスプレーしてください。徐々にお肌が強くなり敏感肌の改善につながります。

Q13. 妊娠中もバイオプトロンを照射しても大丈夫ですか？

A. 妊娠中の方や持病をお持ちの方は、かかりつけの医師にご相談ください。

Q14. 光過敏症でも使用できますか？

A. 紫外線は100%カットしておりますが、念の為ご使用はお控えください。

Q15. 日焼け直後に使用しても大丈夫ですか？

A. 直後はお控えください。炎症が落ち着いてからの照射をおすすめします。

Q16. バイオプトロンの光はなぜ黄色いのですか？

A. 紫外線を100%カットするために黄色いフィルターをはめ込んでいます。そのため、黄色い光に見えます。

Q17. ペットにも使用できますか？

A. はい、できます。ふだんおうちの中にいて日光浴やお散歩ができにくいペットにはバイオプトロンで心地よく日光浴をさせてあげてください。

Q18. ランプの寿命は何時間ですか？

A. バイオプトロンのランプの寿命は約1000時間です。1日計16分使用したとして3,750回使えます。年数にすると、約10年です。※但し、使用(保管)されている環境により異なります。

Q19. ランプが切れたらどうしたらよいですか？

A. スイスより認定されている弊社メンテナンスにて、ランプ交換を行っております。価格は機種によって異なりますので、お問合せください。

Q20. 正規店以外で購入したバイオプトロンの修理はできますか？

A. 正規品であるバイオプトロンはすべてロット管理をしております。それ以外のバイオプトロンの修理・ランプ交換などは承れませんのでご了承ください。

Q21. 保証期間は何年ですか？

A. 保証期間は1年間です。