Pure skin J

取扱説明書

You can download the user manual in Chinese and English from the QR code.

> 您可以从二维码下载 中英文的使用说明书。



中国語・英語の取扱説明書は QRコードよりご確認できます。

製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。 安全を確保するため、本製品使用前に取扱説明書を十分にお読みください。 取扱説明書に保証書がついているので、本取扱説明書を大切に保管ください。

■※喉、眼球、粘膜等には使用しないでください。

クレンジングや洗顔で肌を清潔にし、トリートメント部分 に水溶性のスキンケア製品を塗布します。

◆目尻のしわケア◆

電源を入れて、適度な力でプローブを肌に 対して垂直にあてます。プローブをゆっくり と1cmの間隔で移動させます。 1ヶ所約3~5秒間止めます。5回繰り返して から次の箇所へ移動させます。



◆目尻引き締め◆

雷源を入れた後、片手で機器を持ち、プ ローブを完全に接触させ、適度な力で目 の外側から1cm下を押します。下から上 に、プローブをゆっくりと約2~3 cm押し 上げてから、2~3秒間止めます。 5~6回繰り返して、目の輪郭を引き締め ます。使用中は動きをゆっくりと動かして



◆目の下のたるみ・クマを改善①◆

電源を入れた後、プローブを使用して 目の下のたるみを適度な力で優しく マッサージします。ゆっくりと、目頭から 目尻へ動かします。8~10回繰り返します。



この商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製 品を正しく使用するために、ご使用前に必ずこの説明書をお読み ください。必要なときにいつでもこの説明書を読むことができるよ

1.安全上の注意事項

で使用前に安全上の注意をお読みいただき、取扱説明書の内容 や注意事項に従って正しくお使いください。

○ 危険 操作を誤ると、人身の傷害の原因になります。

△ 注意 操作を誤ると、事故やトラブルの原因になります。

(\) 危険

- 本製品に同梱されている充電ケーブルと製品仕様に適合した充 電器を使用して、正しく充電してください。デバイスのブラグは家 庭用ソケットに接続してください。誤った動作は故障や熱による 火災の原因になります。
- 本製品には充電式バッテリーが内蔵されていますので、火に近 づけたり、高温・高熱の環境で使用したりしないでください。 故障や火災の原因となります。
- 製品が変形、損傷、または臭いがする場合は、電気ショック や火災の危険を避けるために、使用しないでください。

△ 注意

- 危険を避けるため、医療用電子機器との併用はご遠慮ください。
- 心臓手術を受けた方、またはペースメーカーを使用している方 は、使用を禁止されています。
- 初めて使用する場合や敏感な肌の場合は、まず腕などの部分で 試して肌を確認してください。

-

◆あごケア◆

◆目の下のたるみ・クマを改善②◆

電源を入れ、目の周りの皮膚を内側から 外側へ、下から上へゆっくりと動かして優 しくマッサージしてください。

5~6回繰り返します。

◆ひたい・首のケア◆

【シャットダウン】


りと温かくなり始めます。

- 製品が損傷した場合、お買上げ頂きました店舗に速やかに修理 を依頼してください。
- 可燃性の物質の近くでのご使用はおやめください。
- 電源を切ってから、本体のお手入れをしてください。
- 熱による誤動作や火災を防ぐため、本説明書に記載されている 以外の目的で使用しないでください。
- 使用中に異常に熱くなった場合は、使用を中止し、直ちに電源を お切りください。
- 製品が故障している場合は使用しないでください。故障した状 態で使用すると、身体に悪影響を及ぼしたり、その他の危険を 及ぼす可能性があります。
- 同じ箇所での連続使用はおやめください。また、同じ箇所にとめ 置かないでください。(やけどの原因になります)
- 製品を水に浸したり、蛇口で直接すすいだりしないでください。
- 肌や身体の気分が悪い場合は、すぐに使用を中止してください。
- この製品を湿気の多いところに保管しないでください。
- ご使用の際は、貴金属物や時計を外してください。
- ●以下の状況では、この製品を使用しないでください。 -妊娠中、授乳中、または月経中の女性
- -アレルギーのある方、皮膚疾患のある人、皮膚の炎症、皮膚 アレルギー、その他の皮膚疾患、および重度の日焼け
- -皮膚の損傷、湿疹、腫れなどのある方
- 手術を受けたばかりの方 -骨折または整形している人、身体に金属、シリコンポリマー、 またはプラスチックの埋め込みをした方
- -心臓病、悪性腫瘍、てんかん、糖尿病、感染症、急性疾患の方 -ステロイドホルモンを服用している方または肝機能障害に よって毛細血管拡張の方
- -過去3か月間に、しわの除去等を受けた方

2.商品の特徴

この Pure skin J は、EMS (90kHzの電流で、筋肉刺激とそれに よる温熱効果)とLEDレッドの2機能を組み合わせた家庭用アイ ケア製品です。

3.製品の名称

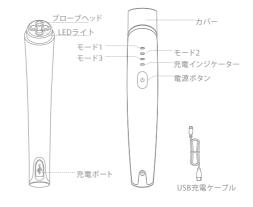

※電源ボタンを押すと、モード1→モード2→モード3と切り替わ ります。電源ボタンを長押しすると、電源がOFFになります。 ※電源ONの後、動作は10分で切れる設定になっています。 ※トリートメントはモード1からのご使用をおすすめします。

4.操作説明

- 最初の使用の際、バッテリーを完全に充電してください。 • 製品をUSB充電ケーブル、充電器に接続し、家庭用電源 コンセントに接続します。
- 充電中、充電インジケーターが赤く点滅します。
- 完全に充電されると、充電インジケーターライトは緑色 に変わります。
- 連続使用で約30分
- 充電時間は約2.5時間です。



【ご使用前の準備】

- ご使用前に身体の金属物(リング、ネックレス、イヤリング、ブレ スレットなど)を取り外してください。
- ご使用前に化粧を落とし肌を清潔にしてしてください。
- アイケアを行う際は、必ずコンタクトレンズを外してください。
- で使用になる際は、水溶性のスキンケア製品を塗布の上で使用 ください。

5.メンテナンス

- •機器のお手入れの前に、電源を切ってください。
- この製品は防水ではありません。水に浸したり、蛇口で直接すす いだりしないでください。
- •柔らかい湿った布または医療用アルコールを使用して洗浄し、 柔らかい乾いた布を使用してきれいに拭いてください。
- ●長期間(2ヶ月以上)使用しない場合は、2ヶ月ごとに充電してから 保管してください。

- •子供の手の届かない場所に保管してください。
- •湿り気やほこりの少ない場所に保管してください。
- ●高温や直射日光の当たる場所での保管は避けてください。

注意:濡れた製品をバッグに入れないでください。

7.保証について

- ●この製品は、個人的なホームケアの使用のみに適しており、 商用目的には適していません。
- ●製品は1年間の保証となり、保証期間は購入日からとなります。
- 当社は、以下の場合保証はいたしません。
- 一不適切な使用で損壊した場合、例えば間違えて電源を差し 込み、不適切なプラグの挿入、または人為的な損傷などの 不適切な使用によって引き起こされた損傷。
- -通常の使用による製品の経年劣化と摩耗。
- -他の目的での使用、または不適切な操作や専門外のメンテ ナンス、本機器以外のアクセサリーの使用によって引き起こ された製品の問題。
- 消耗品、アクセサリー、その他の消耗品が含まれています。
- 不可抗力の要因(雷、地震、火事、洪水など)によって引き起 こされた損傷。

8.よくある質問

動作中に故障が発生した場合は、以下をご確認ください。それで も不具合が解消できない場合や、正常に動作しない場合は、お買 上げ店舗に直接お問い合わせください。お客様自身で分解や修理 はしないでください。

現象	可能の原因	対策
使用中に突然シャットダウンまたは電 源が入らない	バッテリーが完 全に充電されて いない	本体を完全に充電してから使用する。
充電インジケーター が点灯しない	本体、充電器、 プラグが接続さ れていない	本体と充電器を再接続するか、充電器を接続する別の家庭用ソケットに 差し込んでください。
	バッテリーを使 用して休止状態 にします。	バッテリーを起動するには、6~30分間充電します。
皮膚に触れても刺 激や熱を感じない	肌が乾燥し 過ぎる	スキンケア製品の部分に水溶性のス キンケア製品を塗布してから使用しま す。

9.製品仕様

製品名:Pure skin J 定格容量:3.7V/800mAh

定格電力:5.0W 充電電源:5V/1A

重 量:約78.3g

製品サイズ: 28.5 × 38.0× 165.5mm

付属品:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書 連続使用時間:使用するレベルにより30分程度 充雷時間:約2.5時間

保証書 Pure skin J お名前 ご住所 〒 TEL ご購入日 月 保証期間/ご購入日より1年間 販売店印

発売元 株式会社 エヴァンジール 製造販売元 株式会社 アグレックス ■本社 ■本社

₹321-0164

= 261-0023 栃木県宇都宮市双葉 1-13-50 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3 MTG B 棟 9F

TEL 0120-169-119 TEL 043-350-0111 FAX 043-350-0114

9

5

肌を冷やしておくことをお勧めします。

◆ほうれい線ケア◆

ケアが完了したら、電源ボタンを長押しして電源を切ります。

• トリートメントを開始したばかりのとき、皮膚に温かさを感じ

ない場合があります。数分後、内側から外側に向かってゆっく

ケアの過程で肌が熱くなったり、わずかにチクチクすることが

あります。また、使用後に肌がわずかに赤くなることもあります。

これらはすべて正常な現象であり、通常は使用後数分で消え

ます。使用する時肌が異常に熱くなった場合は、使用を中止し、

8