


Cell Body J5
取扱説明書



You can download the user manual in
Chinese and English from the QR code.


您可以从二维码下载
中英文的使用说明书。

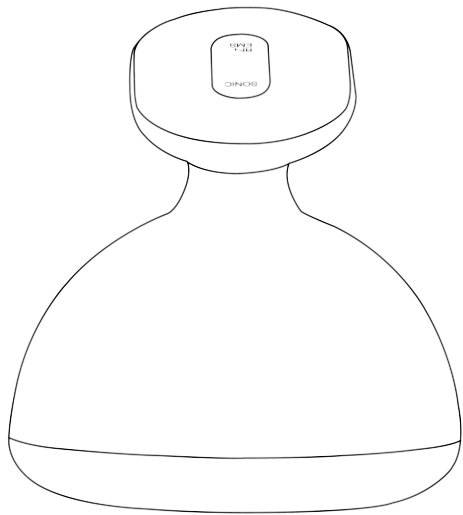

中国語・英語の取扱説明書は
QRコードよりご確認ください。

製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
安全を確保するため、本製品使用前に取扱説明書を十分にお読みください。
取扱説明書に保証書がついているので、本取扱説明書を大切に保管ください。

1. 製品の名称

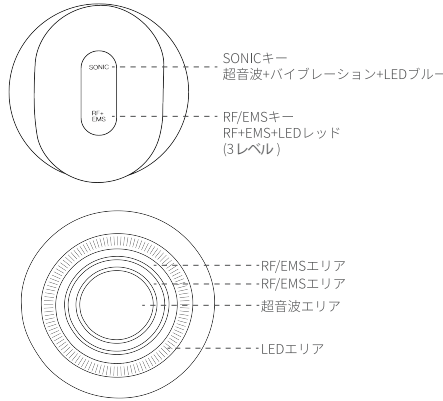

2. 製品仕様

製品名称	Cell Body J5
製品形式	CX-8040
製品寸法	84×40.5×40.5mm
定格容量	7.4V 1000mAh
定格電圧	DC5V 1A
消費電力	8W
超音波周波数	500KHz
材質	ABS PC SUS304
防水等級	IPX7
充電時間	2時間
連続使用時間	30分


3. 使用上の注意

- 本製品の使用にあたり、まずお手入れする皮膚の箇所を清潔にしてください。
- 本製品にはスマート機能(20 秒使用すると、バイブレーションが1秒止まってお知らせする)がつき、時間をオーバーした場合、別の箇所に変えるように促します。
- 専用ジェルを合わせて使用することを推奨します。
- 初めて使用する場合は低いレベルから試すことを推奨します。
- 週に3回のお手入れを推奨しますが、同じ箇所におけるお手入れは10分以下にしてください。
- 1箇所止め置かないでください。(やけどの原因になります)**
- 充電の際は、本体差込み口の水気を取ってから接続してください。**

4. 使用方法

- モードを選びます。
SONICキーかRF+EMSキーのいずれかを押して電源を入れます。
・SONICキー(超音波+バイブレーション+LEDブルー) ※SONIC
1度押すと3つの機能が同時に動きます。動いている時にSONICキーを長押しするとバイブレーションが止まります。
・RF+EMSキー(RF+EMS+LEDレッド)
1度押すと3つの機能が同時に動きます。1度押すごとにレベルが1ずつ上がり、キーを4回押すと止まります。
※SONIC キーと RF+EMS キーの両方を押すと、同時に動き LED が紫になります。
- ヘッド部分に専用ジェルを塗布します。
- お手入れ箇所に軽く押し込み、5. お手入れイメージ図を参考にご使用ください。

5. お手入れイメージ図

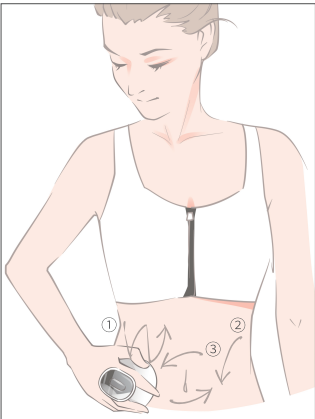


1. 腰部+腹部 (目安10分)
- 腹部の外側から腹部中心へ
Wの字を描くように動かします。
 - 腹部の外側から脚の付け根に
向かって流すように動かします。
 - ヘソ回りを円を描くように動かします。




2. 太もも (目安片脚5分)
- ① 太もも内側部分をヒザから
脚の付け根に向かって動かします。
 - ② 太もも外側や表側も同様にヒザから
脚の付け根に向かって動かします。


3. お尻(目安10分)
お尻と太ももの境目より上に向かって動かします。

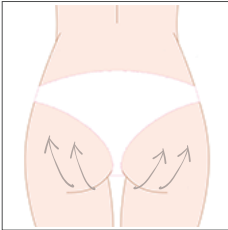


4. 腕 (目安片腕5分)
外側から内側に左右の腕をそれぞれ5分間
ヒジから脇に向かって動かします。
(脂肪の比較的つきやすい内側・外側両方を行います)

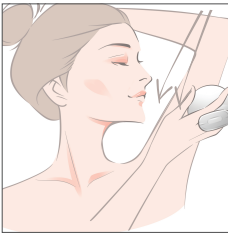

5. 胸部 (目安10分)
背部から脇下まで引き上げて、更に胸部に移動します。
左右それぞれ5分間とします。

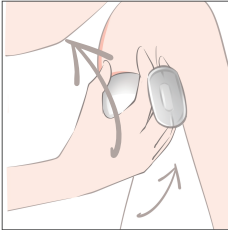

6. 首 (目安10分)
肩から首元を上下に動かします。
左右それぞれ5分間とします。

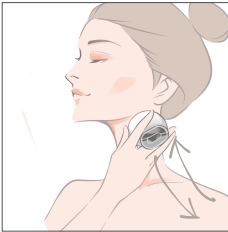

6. LED機能について

- レッドライト——お肌のハリ・弾力のケアに
RF+EMSキーを押すと同時に赤のLEDが照射されます。
- ブルーライト——オイリー肌・開き毛穴・肌荒れのケアに
SONICキーを押すと同時に青のLEDが照射されます。
SONIC+LEDライト青
- 紫の光——お肌のたるみ・むくみのケアに
SONICキーとRF+EMSキーを同時に押すと紫のLEDが照射されます。

注意：心臓(みぞおち)の上方に利用しないでください

7. ライトの状態

- 低電力：表示ランプは同時に3回点滅すると遮断します
- 充電中：表示ランプは点滅します
- 満充電：表示ランプは点灯します
※ RF+EMS のランプが光ります。

8. 保管

- 本製品使用后、電極に付着しているジェルなどの異物を清潔にした後、収納袋に入れて保管してください。
- 本製品はIPX7級の防水仕様なので、直接に水で洗い流すことができます。
- 長期間使用しない場合は、乾燥した場所に保管してください。

9. 注意事項

- 長期間水に浸さないようにしてください。
※入浴剤が入ったバススタブや温泉または高温サウナでは、使用しないでください。
- 手術(整形を含む)を受けた後、お医者さんに使用可否をご相談ください。
- 飲酒後、風邪、熱、血圧異常など不調の場合、または心臓病、重症、悪性疾患、結核性の病気、血液病気、アレルギー体質、皮膚炎などの場合、使用を避けてください。
- 妊娠中、生理中、授乳期間中の使用はご遠慮ください。
- 皮膚炎症、怪我部位並びに眼球、唇、声帯などの敏感な箇所は避けてください。
同じ部位に長期間使用しないでください。
- 本製品は美容だけの目的とし、その他の用途に使用しないでください。
また、無断で分解したり、改造したり、修理したりしないでください。
- 本製品を強い衝突から避けてください。使用前はひびなどがないか確認してください。
- 皮膚が身体に異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- 1箇所止め置かないでください。(やけどの原因になります)**
- 充電の際は、本体差込み口の水気を取ってから接続してください。**

10. よくある問題

よくある問題	対処法
電源が入らない 機器が反応しない	充電されているか確認してください。満充電後、再起動します。
充電できない	充電ケーブルに問題がないか確認してください。充電ポートに異物が詰まっているか確認して、販売店へ連絡してください。
防水について	本製品の防水等級はIPX7級に相当しますので、お風呂に入るとき、またはシャワーを浴びるときに使用できます。ただし、入浴剤が入ったバススタブや温泉または高温サウナでは、使用しないでください。

11. 保証書

- 保証について
- 本保証書は修理の時に必要なので、大切に保管してください。
 - 保証期間は購入日より12ヶ月とします。
 - 保証対象機器は保証期間内において、正常使用時及び保守時、機器本体の部品、材料及び製造工程に不具合が発生した場合、当社は無償修理及び部品交換を実施します。
- 以下の場合には保証対象外とします。
- 誤操作による機器の破損
 - 当社以外の技術員による修理、変動、改造、またはユーザーが自分で部品の交換をした。
 - 不適切な利用が水もしくはその他物質が侵入し破損した。
 - 自然災害が不意な事故による破損か故障。

保証書	
品名	Cell Body J5
お名前	
ご住所 〒	
TEL	
ご購入日	年 月 日 保証期間/ご購入日より1年間
販売店印	

発売元 株式会社 エヴァンジール	製造販売元 株式会社 アグレックス
■本社 〒321-0164 栃木県宇都宮市双葉 1-13-50 TEL 0120-169-119	■本社 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3 幕張テカガーデンB 棟 9F TEL 043-350-0111 FAX 043-350-0114