

Water peeling II

Ultrasonic beauty shovel


使用说明书 ▶

-1-

使用方法 ▶

清洁模式

- 1、长按2秒电源按钮,接通电源
- 2、按一次选择Cleansing模式
清洁导入模式,同时具有彩光功能
手握两侧导电条,进入正离子模式
建议先使用洁面乳,清洁脸部后使用
- 3、将导出液涂满脸部
- 4、如图2所示、用焕肤头进行提拉

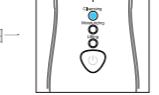


图一

图二

保湿模式

- 1、长按2秒电源按键,接通电源
- 2、按两次选择Moisturizing模式
保湿导入模式,同时具有彩光功能
手握两侧导电条,进入负离子模式
建议先使用面膜,吸收营养后使用
- 3、将精华液涂满脸部
- 4、如图2所示、用焕肤头进行提拉

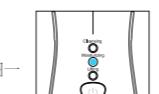


图一

图二

使用方法 ▶

提升模式

- 1、长按2秒电源按钮,接通电源
- 2、按三次选择Lifting模式
紧致提升模式,同时具有彩光功能,
建议配合精华液一起使用,效果更佳
- 3、将精华液涂满脸部
- 4、如图2所示、用焕肤头进行提拉

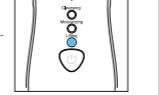

图一

图二


保养以及保管方法 ▶

- 1、确保本机电源处于关闭状态
- 2、焕肤头和主机上的污渍请使用湿纸巾或者酒精进行擦拭
请勿使用稀释剂溶剂等具有腐蚀性的化工业产品擦拭本产品
- 3、清洁后,请放置于干燥处进行保管
请勿放置于浴室等潮湿处进行保管
请勿放置于儿童可触碰到的地方进行保管

-2-

充电方法 ▶

- 1、USB充电线连接USB接口
产品发货前电池属于未满状态
请使用前进行充电
- 2、插在电脑、适配器(另售)或者
手机锂电池的USB接口进行充电
充电中LED灯连续闪烁,充电完毕后LED灯亮
请充电前确认锂电池的状态
初次使用前,请撕下焕肤头的密封膜再进行使用

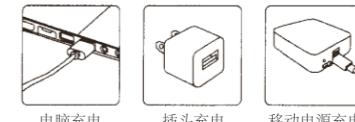

电脑充电 插头充电 移动电源充电

充电注意事项 ▶

本机长按电源按钮不显示开机状态,请进行充电。
产品在运转中会发出“哔哔”的提示音,随后会出现关机状态,
说明电池的剩余量不足,请立即给产品进行充电。

-3-

产品结构 ▶



产品特点 ▶

- 1、深层清洁、清除老化角质。
- 2、色素分解、淡化色斑。
- 3、深层除皱、增强皮肤弹性。
- 4、促进血液循环和淋巴液新陈代谢。
- 5、增强皮肤细胞的再生能力及通透性。
- 6、按摩皮肤、营养导入、杂质导出。

产品参数 ▶

名称: Water peeling II	充电时间: 约3H
输入电压: DC 5V	仪器净重: 122g
功率: ≤3W	工作时间: 15分钟
尺寸: 175*55*67mm	

产品特征 ▶

超声波是一种高频机械振动波,他被广泛应用于医疗和美容领域。该机械波具有机械作用、温热作用和催化作用,在低能高频振动时能对人体的肌肤产生温和的共振作用,增强细胞的活力和各皮层组织间的通透性,疏通汗腺、收缩毛孔。

超声波清洁美容仪利用超声波和纳米技术,以每秒约 20000 次以上的震动使之分子之间剧烈摩擦,这种震动可深入皮肤使分子之间剧烈摩擦,深层温度升高,细胞代谢旺盛,微循环加速,促进代谢产物回流。通过离子流的转换,细胞膜的通透性增强,使半透膜产生胞内原浆微流,是脂肪酸异化成CO₂和H₂O脂肪细腻的体积减小,同时配合一定的针对性产品,美容效果更加显著。

通过高频振动进行深层按摩,在脂肪运动的同时改善微循环,使脂肪细胞燃烧、裂解转化为代谢产物排出体外,从而达到清洁的效果。采用特制铲型探头,能有效进入肌肤下4-7公分,通过声波的震动让美容液变细、雾化,能将这些污垢与多余的皮脂加以乳化,使堵塞在毛孔内的化妆品残渣,污垢乳化,并随着四溅的水花消除,这种清洁效果更快速、更有效。这就是像洗净精密机械的超声波洗净器一样,此种现象也会发生在皮肤上。从而去除角质层,脂肪粒,青春痘等,让你的保养品的养分从此不再浪费,从而让肌肤更好的吸收。

保修卡 ▶

1.本保修卡免费保修权限于生产因产品、技术及质量问题造成的电性能故障。
2.保修期为一年,即产品售出日起见效,一年内有效。
3.保修期内,本公司将免费更新故障的零部件,往返运费由顾客承担。
4.如人为损坏,顾客需支付维修配件费及往返运费。
5.保修卡需正楷字填写,字迹清晰,不得涂改,请顾客妥善保管,若有遗失,恕不补办。

保証書	
品名	Water peeling II
お名前	
ご住所	〒
TEL	
ご購入日	年 月 日
保証期間/ご購入日より1年間	
販売店印	

発売元 株式会社 エヴァンジール 製造販売元 株式会社 アグレックス
■本社 ■本社
〒321-0164 〒261-0023
栃木県宇都宮市双葉1-13-50 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 MTG B 棟 9F
TEL 0120-169-119 TEL 043-350-0111 FAX 043-350-0114

-4-

-5-

-6-

-7-