

Recommended
Product
HIGH PERFORMANCE

Miss
emotion

SUPER MACHINE
Approaches you

E M O T I O N

Electrical Muscle Stimulation

Electroporation

AGLEX
share good life

www.aglex.co.jp

株式会社 アグレックス

(本 社) 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟9F
TEL 043-350-0111 FAX 043-350-0114

(大 阪 支 社) 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-20-10 大明ビル5F
TEL 06-6375-7855 FAX 06-6375-7856

より深く！！より広く！！

これ1台で全ての肌悩みに徹底アプローチ

Miss
emotion

Emotion

複合美容機

干渉波 EMS + 特殊減衰波エレクトロポレーション

表情筋・筋肉ケア

たるみ ゆがみ 首こり 頭皮こり
肩こり バストケア 二の腕引締め

EMS

脳に変わって電気を流して運動神経に刺激をあて、筋肉を動かすマシンです。

美容液導入


乾燥 しわ しみ くすみ
毛穴のひらき

エレクトロポレーション

イオン導入の20倍の成分浸透率があると言われています。大きな分子の成分も皮膚深層までダイレクトに浸透させる事ができます。

振動（エレクトロポレーション）
インターバル（干渉波 EMS）
機能つき

モードセレクト	肌質 / 目的	適応部位
EL-PORATION 1	敏感肌～普通肌	顔・目元・首元
EL-PORATION 2	普通肌～強い肌	顔・首元・バスト
EL-PORATION 3	より刺激を求める方	顔・頭皮
WAVE-SYNTH 1	コリをほぐす	顔・頭皮
WAVE-SYNTH 2	筋肉育成モード①	顔・首・肩・二の腕
WAVE-SYNTH 3	筋肉育成モード②	顔・首・肩・バスト

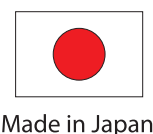

エモーション

- サイズ：W510×D240×H150mm
- 質量：5.6kg/6.15kg(付属品含む)
- 消費電力：10W
- サロン価：お問い合わせください

詳細はコチラ




エモーションの徹底アプローチの 3 つの秘密！！

ここがすごい ①（干渉波 EMS）

エモーションの **干渉波 EMS** は表情筋に
より深く より広く そして より強く アプローチ

2つの周波数を組み合わせ干渉させる事で生まれた合成波（うねり）を干渉波と言います。低周波に似た体感に加え、うねりの高低頻度をミックスさせていることにより、筋肉の慣れを防ぎ、筋緊張（収縮と弛緩）と循環促進と回復促進が同時に行えます。その上皮膚抵抗値が低いことで不快感が少なく、より多くの電流を送りこむことが出来るのです。

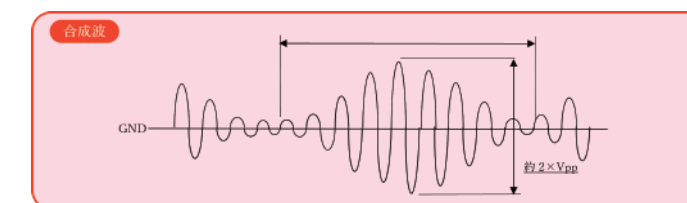


ここがすごい ②（エレクトロポレーション）

エモーションの **特殊減衰波** は直角三角形のような形をしており、皮膚の隙間を空ける時間が短く、瞬間的に効率良く美容成分を肌深部へ届けることが出来ます。その為、肌への刺激も少なくより安全にトリートメントを行うことが出来ます。

EL-PORATION 1, 2 特殊尖塔-減衰波形

EL-PORATION 3 矩形-減衰波形

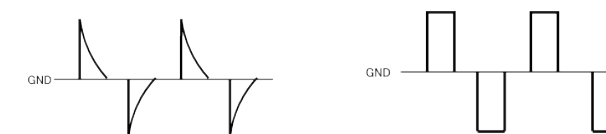


ここがすごい ③（プローブ）

エモーションのプローブは **4極ピン付き**
ターゲットエリアにエネルギーが集中するように設計されています。また、Wプローブにより左右バランスの良い施術と時間短縮が可能です。



トリートメント例

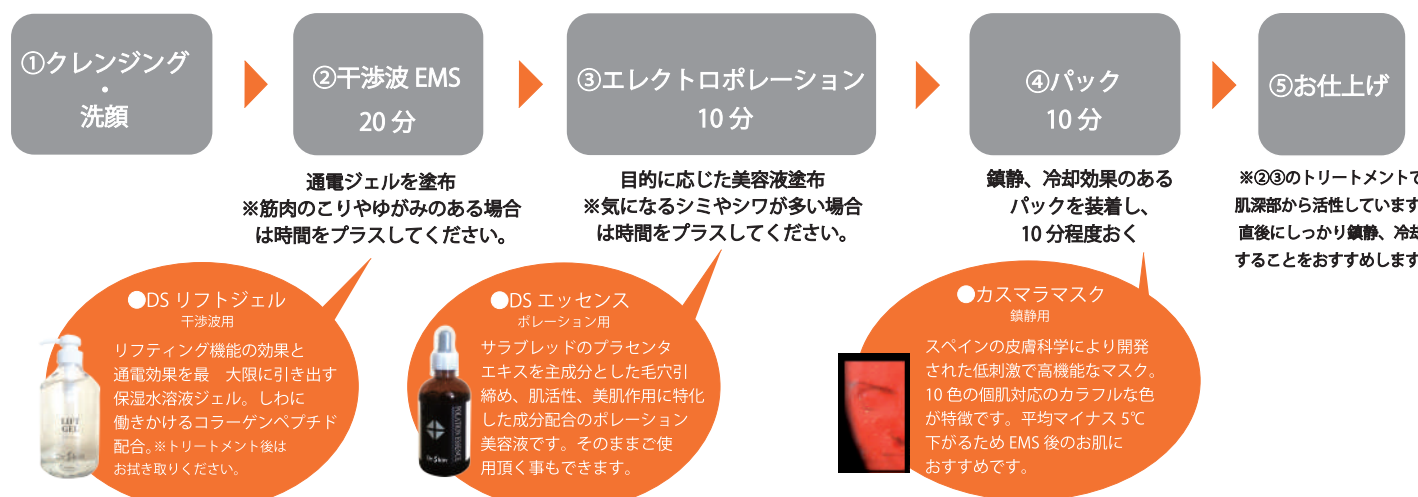

I GOT IT.

FACE

BUST

BODY



What's your name?

My Name is Dr.SKIN

私の名前はドクタースキン。
多くのサロン様からのご要望から生まれてきた
トータルビューティーマシンです。
手に入れたいのは整ったキメ、あふれる透明感、引き締まったフェイスラインに
なりたいですって？
おまかせください、ハリもツヤもある若々しい肌に仕上げていきましょう。
私の名前はドクタースキン。



詳細はコチラ



Dr. skin™

肌理論に基づき、フェイシャルではピーリングから
リフトアップ。ボディではピーリングから引き締め
までを一台で行える総合美容機器です。

ドクタースキン

- サイズ：W275×D379×H253mm
- 質量：4kg
- 消費電力：60W
- サロン価：お問い合わせください


専用ワゴン別売り



MADE IN KOREA

Step1 ダイヤモンドピール

美肌づくりの鍵、
美容成分の浸透しやすい肌へ

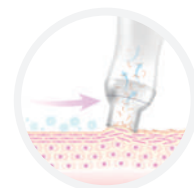

古くなった角質を取り除くと同時に
コラーゲン生成を促します。
フェイシャルはもちろん、ザラつきが
気になるボディの角質ケアにも効果的



Point

肌タイプに合わせて使い分けできる
3種類のダイヤモンドチップ

敏感肌の方にも安心してお使いいただけるダイヤモンドピーリングは、
塗布剤などの消耗品も不要で、お手軽にお使いいただけます。

20…ボディ、30…普通肌、40…敏感肌

Step2 エレクトロポレーション

美容液の効果を極限まで引き上げる



大・小2種類のハンドピースで、フェイシャルはもちろん
ボディケアにも使える本物のエレクトロポレーションを実感してください
(コラーゲン、ヒアルロン酸、プラセンタなど高分子・高機能美容液を真皮層まで効率良くお届けします)

Step3 リフティングヘッド

特殊な電気パルス効果で簡単にリフトアップできる

フェイスラインにぴったりとフィットするY字ヘッドからの特殊な電気パルスで
お顔の筋肉を気持ちよく刺激し、たるみのない滑らかなフェイスラインを作り上げます。
むくみ改善・小顔作りにも効果的



おすすめ化粧品/DSシリーズ



●DSカーミングローション

ピーリング後のお肌を鎮静させ、安定させるためのローションです。鎮静・抗炎症作用の成分をメインに、お肌の潤いを保つ成分を配合しています。コットン等にたっぷりとローションをつけてパックを行いお肌を落ち着かせます。

- 容量：500ml
- サロン価：お問い合わせください



●DSエッセンス

サラブレッドのプラセンタエキスを主成分とした、毛穴引き締め成分、グリシルグリシンも配合。その他にも肌活性・美白作用に特化した成分を配合した、ポレーション用の美容液です。そのままご使用いただくこともできます。

- 容量：100ml
- サロン価：お問い合わせください



●DSリフトジェル

ドクタースキンのリフティング機能の効果を最大限に引き出すために開発された、専用のジェルです。保湿をメインに、シワに働きかけるコラーゲン・ペプチドなども配合。トリートメント後は拭き取りをしてください。

- 容量：700g
- サロン価：お問い合わせください



FACE

BUST

BODY

OXYJET LEO COOL

High-tech Oxygen-Modules for the perfect treatment of Face and Body without needles, gentle, effective and safe!

FROM GERMANY



針も電気も使わない酸素注入美容法

NORA BODE

OXYJET LEO COOL



高濃度酸素(濃度95%)を使用し、美容液を肌深部に圧力注入。
ハンド技術のようにお客様のお肌と直接コンタクトしながら
機器を使用します。

私たち生命体にとって必要不可欠な酸素。
オキシジェットレオは肌に心地よい圧力で
高濃度酸素と美容成分を肌深部に効率よく注入します。
現在ご使用中の化粧品もオキシジェットレオを使えば
より効果的に酸素との相乗効果を期待できます。
更に酸素と化粧水をマイクロミストにして
お肌に吹きつけるマイクロミストスプレーと
ピュアな酸素を体内に取り入れ、身体の中からリフレッシュさせる、
ピュア酸素吸入も一台で行えます。

オキシジェットレオクール

エステ先進国ドイツの技術を駆使した最新のエステティック
機器。肌に心地よい圧力で高濃度酸素と美容成分をお肌に効
率よく届けます。

- サイズ：W520×D203×H535mm
- 質量：21kg
- 消費電力：400W
- サロン価：お問い合わせください

酸素圧による心地よいリズミカルなマッサージ効果を、
お顔のみならず、デコルテ・ボディにもご使用いただけます。



吸引マスク



詳細はコチラ



BIO2 LIGHT

FACE

HAIR

バイオ2ライト

オキシジェットに接続して使用するLEDドームです。
高濃度酸素を吸い込みながら光を浴びることが出来ます。
ドームの内側には4色(レッド、オレンジ、グリーン、ブルー)
のLEDを搭載し、点灯させる組み合わせも、お肌の状態に応じ
て選択できます。

- サイズ：W330×D400×H370mm
- 質量：3kg
- 消費電力：最大15W
- サロン価：お問い合わせください



株式会社 アグレックス

- (本社) 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟9F
TEL 043-350-0111 FAX 043-350-0114
- (大阪支社) 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-20-10 大明ビル5F
TEL 06-6375-7855 FAX 06-6375-7856
- (佐野営業所) 〒327-0843 栃木県佐野市堀米町字菊川13370
(メンテナンス) 〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町62-1